

SYIS



DERMO LIFT & PEEL

PŘÍSTROJ K ČIŠTĚNÍ A LIFTINGU OBLIČEJE

P R O F E S S I O N A L

CZ



ČIŠTĚNÍ - KAVITAČNÍ PEELING

Odstraňuje odumřelé kožní buňky a černé tečky
Uzavírá rozšířené póry
Vyhlazuje jizvy a vyhlazuje strukturu pokožky
Rozjasňuje a čistí pokožku
Reguluje a snižuje vylučování kožního mazu

LIFTING A VÝŽIVA POKOŽKY - SONOFORÉZA

Zpevňuje a napíná pokožku
Vyhlazuje vrásky
Podporuje vytváření kolagenu
Stimuluje obnovu buněk
Přenáší účinné látky do hlubokých částí pokožky

Přístroj Dermo Lift & Peel je určen k provádění kosmetických procedur v domácích podmínkách a pro profesionály Jeho použití je velmi snadné, umožňuje provádět vybrané ošetření bezpečným a neinvazivním způsobem.

Přístroj Dermo LIFT & PEEL se používá k čištění, zvedání kontur obličeje a vyživování pokožky.

ČIŠTĚNÍ - KAVITAČNÍ PEELING

Přístroj Dermo LIFT & PEEL SYIS používá k čištění ultrazvukové vlny. Tato procedura se odborně nazývá kavitační peeling. Kavitační peeling je především bezbolestným čištěním pokožky pomocí ultrazvukových vibrací. Umožňuje důkladně odstranit přebytečný kožní maz z pórů a vlasových folikulů, a také zbavit se černých teček.

LIFTING A VÝŽIVA POKOŽKY - SONOFORÉZA

Lifting a výživa pokožky pomocí přístroje Dermo LIFT & PEEL SYIS je procedurou, která spočívá ve vtlačování nízkomolekulárních účinných látek obsažených v ampuli hluboko do pokožky pomocí ultrazvukových vln. Tato procedura se odborně nazývá sonoforéza. Vtlačované látky se dostávají do hlubokých vrstev pokožky a vyživují ji. Ultrazvukové vlny vytvářené přístrojem urychlují buněčný metabolismus a obnovu buněk. Ve výsledku získáme efekt vyživování a liftingu pokožky, tj. zlepšení kontur obličeje.

ÚČINKY PROCEDURY

KAVITAČNÍ PEELING - čištění

- odstranění rohové vrstvy pokožky,
- snížení nečistot, černých teček a rozšířených pórů,
- odstranění a snížení sekrece kožního mazu,
- vyhlazení pokožky.

SONOFOREZA - lifting a výživa pokožky:

- zvedání kontur obličeje a spodní brady
- zpevnění struktury pokožky,
- vyhlazení povrchových vrásek, včetně vějířků („vraních nohou“),
- zvýšení syntézy kolagenu,
- terapie zamezující stárnutí – prevence.

KONTRAINDIKACE PROCEDURY

- těhotenství,
- rány, oděrky na pokožce,
- plísňové, bakteriální a virové leze,
- nemoci nervového systému,
- duševní poruchy,
- epilepsie,
- nádor (během a po léčbě),
- infekce,
- část pokožky, pod kterou je kov (např. kovové implantáty v kosti po její zlomenině), plast, silikon (např. silikonové implantáty v prsou),
- části pokožky, ve které se nacházejí lékařské a elektronické přístroje, např. naslouchadla, kardiostimulátory, umělé srdce atp.
- děti do 12 let,
- části pokožky s kovovými prvky v těle (např. náušnice v břiše),
- hypertenze,
- cukrovka,
- srdeční choroby.

Úplné ošetření zahrnuje čištění pokožky kavitačním peelingem a vtačování účinných látek obsažených v ampuli pomocí sonoforézy. Před zákrokem vydezinfikujte kovovou část špachtle (nestříkejte tekutinu přímo na špachtli).

1. PŘÍPRAVA POKOŽKY K OŠETŘENÍ

- odlíčení
- peeling
- tonizace

2. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJEM DERMO LIFT & PEEL - KAVITAČNÍ PEELING

Hydratujte pokožku tonikem nebo micelární vodou SYIS. Během kavitačního peelingu musí být pokožka navlhčena, díky čemuž dochází k fenoménu kavitace. Postup je nutné během zákroku pravidelně opakovat, aby nedošlo k popálení. Při tomto postupu vznikají mikroskopické bubliny plynu a řada chemických procesů, jejichž důsledkem je rozpad mrtvých buněk v rohové vrstvě pokožky.

Stisknutím tlačítka START/STOP přístroj spustíte, tlačítkem MODE nastavíte Nízkou frekvenci - povrchové čištění, nebo Vysokou frekvenci - hloubkové čištění (viz obr. 1).

Kovová část špachtle musí být vedena pod úhlem 45 stupňů vzhledem k povrchu pokožky (viz obr. 2). Špachtli pohybujte ze středu obličeje směrem ven (viz obr. 3), bez zastavování na místě. Procedura trvá asi 10 minut.




KAVITAČNÍ PEELING



VTLAČOVÁNÍ / SONOFORÉZA	
L 	(L) NÍZKÁ FREKVENCE
 H	(H) VYSOKÁ FREKVENCE
KAVITAČNÍ PEELING / SKIN SCRUBBER	
L 	(L) NÍZKÁ FREKVENCE
 H	(H) VYSOKÁ FREKVENCE

Obr. 1 Zobrazení LED diod v jednotlivých provozních režimech

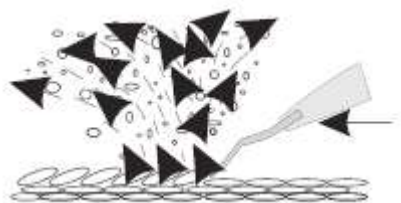

ČIŠTĚNÍ

Obr. 2 Způsob držení špachtle během čištění procedury čištění - úhel 45 °



Obr. 3 Směry pohybu špachtle během čištění a sonoforézy.

3. ZPEVNĚVÁNÍ PŘÍSTROJEM DERMO LIFT & PEEL — VTLAČOVÁNÍ ÚČINNÝCH LÁTEK - SONOFORÉZA

Před zahájením sonoforézy naneste na obličej Ultrazvukový gel SYIS smíchaný s vybranou ampulí SYIS, Stisknutím tlačítka START/STOP přístroj spustíte,

tlačítkem MODE nastavíte Nízkou frekvenci - povrchové vtlačování nebo Vysokou frekvenci - hloubkové vtlačování (viz obr. 1).

Otočte špachtli a přesouvejte hladší koncovku kovů po pokožce pod úhlem 45 stupňů vzhledem k povrchu pokožky (viz obr. 4). Špachtli pomalu pohybujte od středu tváře směrem ven (viz obr. 3), aniž byste se zastavili na místě. Pamatujte, že v místě vtlačování musí být pokožka pokryta Gelem. Procedura trvá asi 10 minut.



VTLAČOVÁNÍ

Obr. 4 Způsob provádění procedury sonoforézy



SONOFORÉZA

4. DOPLŇKOVÁ PÉČE

Po dokončení procedury aplikujte vybranou masku z mořských řas SYIS, aby se uklidnilo zarudnutí. Maska pokožku navíc vyživuje, rozjasňuje a sjednocuje její odstín.

Po odstranění masky naneste krém SYIS odpovídající pokožce.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškerý servis a opravy musí provádět servis společnost ACTIV.
2. Neinstalujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti vlhkých míst nebo mokřýma rukama. Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech odpojte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na servis společnosti ACTIV:
 - a. do přístroje vnikla kapalina,
 - b. z přístroje vychází podivný zápach, kouř nebo divné zvuky,
 - c. napájecí kabel byl poškozen,
 - d. přístroj byl převrácen nebo došlo k poškození krytu.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj v místech, kde může dojít k poškození napájecího kabelu.
5. Do otvorů v přístroji nevkádejte žádné předměty. Pokud do otvoru vnikne cizí těleso, vytáhněte kabel ze zásuvky a obraťte se na distributora nebo výrobce.
6. Nepokládejte přístroj na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
7. Z důvodu zajištění životnosti přístroje se doporučuje vyčkat jednu minutu před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím, a naopak).
8. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě existuje riziko nesprávné funkce nebo dokonce spálení přístroje.

POZOR:

V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na servis společnosti ACTIV. Vyhnete se tak riziku. Tento přístroj není určen k použití dětmi, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností s nebo znalostí tohoto přístroje, pokud toto použití není prováděno pod dohledem nebo v souladu s pokyny k používání přístroje.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přístroj je vyroben z materiálů, které lze recyklovat a musí být vrácen firmě SYIS.

DEZINFEKCE PŘÍSTROJE

Dezinfikujte kovovou špachtli kosmetickým tamponem navlhčeným vhodným dezinfekčním prostředkem.

OBSAH BALENÍ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Balení obsahuje:

- špachtli,
- nabíječku,
- návod,
- záruku.

Dodatečné informace:

Slabá baterie je signalizována pětinasobným akustickým signálem a poté se přístroj automaticky vypne. Výchozí doba nepřetržitého provozu přístroje je 10 minut. Po uplynutí této doby se přístroj po dvojitém pípnutí automaticky vypne.

Technické údaje:

1. Kavitační peeling 25 kHz
1. Ultrazvuk 2 MHz
2. Napětí 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
3. Nabíječka:
Vstup AC 100-240 V, 50/60 Hz Výstup DC 5,5 V, 500 mA
4. Baterie DC 3,7 V 850 mA
5. Maximální výkon 1.5 W $\pm 10\%$

DOVOZCE:
UVLASKU.CZ
VenyLab s.r.o. Otakara
Ševčíka 994/30636 00 Brno
www.uvlasku.cz