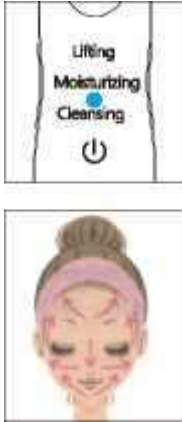
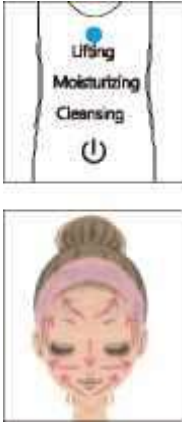


Nabíjení	Způsob použití	Způsob použití
1 První nabíjení Baterie není plně nabitá. Před prvním použitím baterii plně nabijte. 2 K nabíjení přístroje můžete použít port USB na jiném zařízení nebo telefonní nabíječku. Během nabíjení střídavě blikají kontrolky LED. Jakmile je baterie nabitá, přestanou blikat. Před nabíjením odlepte ochrannou fólii na přístroji.  Pozor Přístroj upozorňuje na nízkou úroveň nabití baterie akustickým signálem. Nabijte přístroj, pokud vydá zvuk „bi-bi-bi“ (nízký stav nabití baterie), jinak se přístroj automaticky vypne. Přístroj se po 10 minutách provozu automaticky přepne do pohotovostního režimu. Po 1 minutě se automaticky vypne. Baterie se plně nabije za 150 minut. První nabití může trvat až 5 hodin. Po úplném nabití může přístroj pracovat až 80 minut. Nevybíjejte přístroj úplně. Může to ovlivnit životnost baterie.	Cleansing / čištění Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete přístroj Jedním stisknutím tlačítka vyberte režim Cleansing (čištění) Naneste na obličej vhodnou tekutinu (např. vodu) Přístroj používejte podle obrázku vpravo.  Moisturizing / hydratace Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete přístroj Stisknutím tlačítka dvakrát vyberte režim Moisturizing (hydratace) Naneste na obličej vhodnou tekutinu (např. vodu) Přístroj používejte podle obrázku vpravo. 	Lifting Stisknutím tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete přístroj Stisknutím tlačítka třikrát vyberte režim Lifting Naneste na obličej vhodnou tekutinu (např. vodu) Přístroj používejte podle obrázku vpravo.  Obsluha a skladování Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý K čištění přístroje NEPOUŽÍVEJTE ředidlo, rozpouštědlo ani jiné korozivní průmyslové výrobky, aby nedošlo k poškození Skladujte v suchém a chladném místě. Skladujte mimo dosahu dětí.

Způsob nabíjení	Bezpečnostní opatření	Likvidace přístroje
 Ostatní příslušenství • Návod k produktu • Nabíjecí kabel USB	1. Přístroj je profesionálním zařízením k použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem Vám umožní vyhnout se nežádoucím účinkům během procedury. 2. Přístroj nerozebírejte ani se jej nepokoušejte používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk). 3. V následujících případech okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) do přístroje vnikla kapalina, b) z přístroje vychází podivný zápach, kouř nebo divné zvuky, c) je poškozen napájecí kabel, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt. 4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj v místech, ve kterých by někdo mohl šlapat po napájecím kabelu. 5. Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Pokud do otvoru vnikne cizí těleso, vytáhněte kabel ze zásuvky a obraťte se na distributora nebo výrobce. 6. Nepokládejte přístroj na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. Při pádu může dojít k poškození přístroje. POZOR: 1. Tento přístroj smí používat děti ve věku od 8 let, osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalosti přístroje, pokud je zajištěn dohled nebo jsou poskytnuty pokyny týkající se používání přístroje bezpečným způsobem tak, aby byly známy rizika související s jeho používáním. 2. Přístroj není určen dětem ke hraní. Děti si nesmí s přístrojem hrát. 3. Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo lidé, kteří nemají dostatečné znalosti týkající se používání přístroje. 4. Tento elektrický přístroj není hračkou. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým přístrojem můž být nebezpečné, nebo dokonce smrtelné, proto musí být přístroj používán a uchováván mimo dosah dětí.	Opořezávané elektrické přístroje, příslušenství a obaly musí být odevzdány do střediska k recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrické přístroje nesmí být likvidovány s domovním odpadem. Dodržujte pravidla k likvidaci tohoto typu přístrojů. Z důvodu ochrany životního prostředí se v souladu se směrnicí 2012/19/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, musí použité elektrická zařízení sbírat odděleně a poté odevzdat do sběrných míst použitých elektrických a elektronických zařízení. Na konci své životnosti obsahují staré přístroje plnohodnotné prvky, které lze recyklovat, a proto musí být odevzdány k recyklaci. Proto musí být odevzdány do příslušných sběrných míst nebo mohou být také předány firmě ACTIV Tomasz Pacholczyk. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA Přístroj musí být přepravován při teplotě mezi (–) 20 °C až (+) 50 °C, pouze v originálním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmíte přístrojem házet ani jej upustit, ani jej vystavovat mechanickým nárazům nebo povětrnostním podmínkám. Technické údaje Napájení: 5 V / 600 mA Nabíjení: vícenásobné (lithiová baterie) Hmotnost: 99 g Výkon: 2 W Rozměry: 173 * 55 * 15,5 mm